

PRIVATE BRAND CATALOG



K.O. Dental corp.

キレイな歯は、毎朝の
ちゃんとしたケアから始まる。



オーラルピュア Oral Pure

薬用歯みがき

- 殺菌成分「CPC」「IPMP」
- チキソトロピー特性
- 発泡剤・研磨剤無配合

(90g×6本入)

殺菌成分「CPC」がプラーク表面に作用し「IPMP」がプラーク内部へ浸透します。茶カテキン還元力が「CPC」「IPMP」の強力殺菌効果をさらにパワーアップさせるため、より高い歯周病予防、口臭予防に期待が持てます。キサンタンガムの配合量を増やすことで、チキソトロピー性が大幅に向上し、手磨きから電動歯ブラシによるブラッシングまで幅広くご使用いただけます。



オーラリーフ OraLeaf

薬用マウスウォッシュ(希釈タイプ)

- クロルヘキシジングルコン酸塩
- グリチルリチン酸モノアンモニウム
- 天然由来キシリトール 添加物：甘味剤

(100ml×6本入)

〈承認番号 22800DX00332〉


クロルヘキシジングルコン酸塩洗口液のオーラリーフが、口腔内を清潔に保ちます。ワンタッチ開封できるキャップは使いやすく、1本で360～700回の使用が可能。爽やかなミントの香りと天然由来のキシリトール配合で、口腔内をすっきり爽快にします。



医薬部外品

その歯ブラシ、きちんと選んでる？

症状・硬さ別 歯ブラシ選択の目安

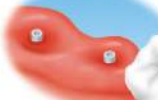SS	 インプラントのオペ後  歯肉の炎症が強い  抜歯後	G.V.K 3.07 SS ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 SS ➡ P.3 
S	 歯肉炎  楔状欠損  知覚過敏  出血しやすい	G.V.K 3.07 S ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 S ➡ P.3  G.V.K SLIM S ➡ P.4  G.V.K モーニン ➡ P.6 G.V.K クリアモーニン ➡ P.6 G.V.K モーニン COMPACT ➡ P.6
MS	 健康な歯肉 少し軟らかめがお好みの方へ	G.V.K モーニン COMPACT MS ➡ P.6  G.V.K クリアモーニン MS ➡ P.6  G.V.K モーニン MS ➡ P.6 
M	 健康な歯肉 ブラッシング圧も適切な方へ	G.V.K fino ➡ P.5  G.V.K 3.07 M ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 M ➡ P.3  G.V.K SLIM ➡ P.4 G.V.K 3.10 ➡ P.4 G.V.K 3.11 ➡ P.4
MH	 厚く堆積したプラーク	G.V.K モーニン COMPACT MH ➡ P.6  G.V.K クリアモーニン MH ➡ P.6  G.V.K モーニン MH ➡ P.6 
H	 硬くこびりついた汚れ	G.V.K 3.07 H ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 H ➡ P.3  G.V.K 3.10 H ➡ P.4  G.V.K 3.11 H ➡ P.4 
		T (ミディアムとハードのダブル植毛)  時間の経過したプラーク等 落とすにくい汚れが部分的 に付着している方へ G.V.K 3.07TWIN ➡ P.4 

子供用歯ブラシ年齢別早見表

➡ P.8

0(歳) ——— 乳歯列 ——— 6(歳) 8(歳) — 混合歯列後期 — 12(歳)
5(歳) — 混合歯列前期 — 9(歳)

CIAO C36

CIAO C38

CIAO C37

G.V.K モーニン KID

G.V.K モーニン CHILD

お気に入りの歯ブラシで みんな笑顔になろう。



G.V.K歯ブラシ

デュボン社製最高級のタイネックス612ナイロンを使用したシリーズです

ベストセラー&ロングセラーのミニヘッドタイプ

幅広い年代の方にオススメです。



原寸大

G.V.K 3.07

(12本入)

配列/3列22穴 耐熱温度/60℃ 日本製

ミニ ヘッド	ラウンド 加工 の毛先	滑り止め付 ハンドル	しなやか ネック	毛先を整える キャップ付		■ 毛のかたさ SS S M H	■ カラー グリーン レッド イエロー ブルー クリア	■ 名入れ パターン A
-----------	-------------------	---------------	-------------	-----------------	--	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

※クリアはミディアムのみ単色12本入

G.V.K3.07とヘッドの大きさは変わらず奥まで磨きやすいロングネック&ロングハンドルになりました

ネックが長いのでハンドル肩部分が口角に当たりにくく、唇を圧迫せずに磨けます。



原寸大

G.V.K Fit 3.07

(12本入)

配列/3列22穴 耐熱温度/60℃ 日本製

ロングネック & ロングハンドル	ラウンド 加工 の毛先	滑り止め付 ハンドル	しなやか ネック	毛先を整える キャップ付		■ 毛のかたさ SS S M H	■ カラー グリーン レッド イエロー ブルー クリア	■ 名入れ パターン A
------------------------	-------------------	---------------	-------------	-----------------	--	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

※クリアはミディアムのみ単色12本入

ハードとミディアムのダブル植毛によりプラークを落としやすくなりました

時間の経過したプラークも両端の硬い毛先を使って効率よく落とせます。




原寸大

G.V.K 3.07 TWIN

(12本入)

配列／3列 22穴 耐熱温度／60℃ 日本製

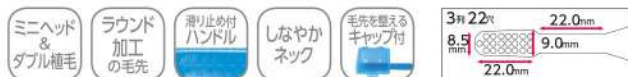

効率良く磨くことができるサイズです

細かなブラッシングが苦手な方、一気に効率良く磨きたい方にオススメです。



原寸大

G.V.K 3.10

(12本入)

配列／3列 27穴 耐熱温度／60℃ 日本製



より効率良く磨くことができるサイズです

大きなヘッドで効率良く磨きたい方、時間の無い時などにも。



原寸大

G.V.K 3.11

(12本入)

配列／3列 31穴 耐熱温度／60℃ 日本製



グリップ感を高めるラバーグリップと操作性の良いスリムヘッドタイプ

スリムヘッド&スリムネックでお口の小さな女性や隅々まで丁寧に磨きたい方にオススメです。



原寸大

G.V.K SLIM 「人間は小指でものを握る」という工学デザイナーの発想から生まれたテーパーデザイン (12本入)

配列／3列22穴 耐熱温度／80℃ 日本製



fino by G.V.K

上質で洗練されたブラッシング time を



原寸大

G.V.K fino

4色3本 (12本入)

配列/4列26穴 耐熱温度/60℃ 日本製



■ 毛のかたさ

M

■ カラー

オニキス
ブラック

ターコイズ
ブルー

コーラル
ピンク

アメジスト
パープル

■ 名入れ

パターン
C

携帯に便利なキャップ付きの部分清掃用歯ブラシ
歯ブラシでは届きにくいリスク部位をピンポイントで磨けます。



原寸大

G.V.K Spot

(24本入)

耐熱温度/80℃ 日本製



■ 毛のかたさ

S

M

■ カラー

クリア
グリーン

クリア
ピンク

クリア

こんな部位にオススメ あなたの口にあてはまる箇所はありますか？



① 歯列不正 (叢生)



② 矯正装置周辺



③ 最後臼歯遠心



④ 孤立歯



⑤ 智歯周辺



⑥ 根分岐部



⑦ 根面板 (コーピング) 周辺

コンパクトヘッド & ロングネックで口腔内の操作がよりアクティブに

コンパクトヘッドで小さなお口の方や1歯ずつ丁寧に磨きたい方にオススメです。



原寸大

G.V.K モーニン COMPACT

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列19穴 耐熱温度/60℃ 日本製



■ 毛のかたさ



■ カラー



■ 名入れ



原寸大

G.V.K クリアモーニン

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列24穴 耐熱温度/60℃ 日本製



かわいい
ハート型
ホール



■ 毛のかたさ



■ カラー



■ 名入れ



原寸大

G.V.K モーニン

(各色20本/100本入BOX)

(単色25本入)

配列/3列24穴 耐熱温度/60℃ 日本製



かわいい
ハート型
ホール



■ 毛のかたさ



■ カラー



■ 名入れ



ハンドルに歯科医院名、電話番号などの名入れができます。

新規版代: ¥3,000 (税抜) 名入れ代金: 1本 ¥10 (税抜)

まとめ買いで版代・印刷代全て無料!

名入れパターン

A	50ダース以上ご購入の場合、版代・印刷代全て無料
B	1,000本以上のご購入の場合、版代・印刷代全て無料
C	25ダース単位のご購入の場合、版代・印刷代全て無料



▲名入れ参考写真

■ 名入れパターンA、Bの場合

5mm×45mm(最大)の印刷範囲まで可能

但し細かな書体・ロゴ・シンボルマークなどは鮮明に再現されない場合がございますので事前にご相談ください。

■ 名入れパターンCの場合

ゴシック体の文字のみで3mm×35mm(最大)の印刷範囲まで可能

ロゴ・シンボルマークの細かな内容は、印刷できません。

初めてご使用になる方にも使いやすいストレートタイプ



原寸大

G.V.K フレックスピッカー

日本製

弾力のある
フレキシブル
ネック滑り止め
付

■ サイズ

SSS

SS

S

M

L

ピンク

ホワイト

イエロー

ブルー

グリーン

■ 耐熱温度

80℃

* ねじったワイヤーがほどけてしまう事故を防止するため、ハンドルを回転させるとブラシが抜けるようにしてあります。
ハンドルを回転させてのご使用はお止めください。

* ワイヤー部分を曲げてのご使用はお避けください。

柄が短く力のコントロールがしやすいため、
前歯部・小臼歯部へのご使用に適しています。



▼ 携帯ケース

携帯ケース付
(5本入×12箱)



シンプルパック
(8本入×6パック)

コントロールしやすいカーブタイプ



原寸大

G.V.K R-50 (アールゴジュウ)

日本製

円弧の半径
50R滑り止め
付

■ サイズ

SSS

SS

S

M

L

ピンク

ホワイト

イエロー

ブルー

グリーン

■ 耐熱温度

80℃



携帯ケース付
(4本入×12箱)



シンプルパック
(8本入×6パック)



院内指導用
(40本入)

小臼歯部はもちろん、なだらかなカーブが自然に頬を
避けるため、大臼歯部へのご使用にも適しています。

臼歯部までしっかり届くアングルタイプ



原寸大

G.V.K 108 (ワンオーエイト)

日本製

臼歯部まで届く
108度設計口腔内を
傷つけない
丸形ヘッド滑り止め
付

■ サイズ

SSS

SS

S

M

L

ピンク

ホワイト

イエロー

ブルー

グリーン

■ 耐熱温度

80℃



携帯ケース付
(4本入×12箱)



シンプルパック
(8本入×6パック)



院内指導用
(40本入)

108度の角度で臼歯部への到達性に優れ大臼歯部へ
のご使用にも適しています。

G.V.K 歯間ブラシ

○強化ワイヤーを採用

従来比15%太いワイヤーを従来の太さまでねじり、従来比130%の強度に。

○用途に応じて選べる3つのパッケージ(フレックスピッカーは除く)



サイズ目安(共通/原寸大)

SSS

ピンク

通過径
0.7mm

歯間空隙が特に狭い部位に

SS

ホワイト

通過径
0.9mm

歯間空隙が狭い部位に

S

イエロー

通過径
1.2mm

歯間空隙がやや狭い部位に

M

ブルー

通過径
1.5mm

歯間空隙がやや広い部位やブリッジの周辺などに

L

グリーン

通過径
1.8mm

歯間空隙が広い部位や歯根が露出した部分に

0~6歳
の方へ



原寸大

CIAO C36

(12本入)

配列/3列17穴 耐熱温度/60℃ 日本製



5~9歳
の方へ



原寸大

CIAO C37

(12本入)

配列/3列20穴 耐熱温度/60℃ 日本製



8~12歳
の方へ



原寸大

CIAO C38

(12本入)

配列/3列23穴 耐熱温度/60℃ 日本製



G.V.K MORNIN' モーニン

シンプル包装のお子様向け歯ブラシです。
小さな手でも握りやすい太めのハンドルが特長です。

1~5歳
の方へ



原寸大

G.V.K モーニン KID

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列17穴 耐熱温度/60℃ 日本製



6~12歳
の方へ



原寸大

G.V.K モーニン CHILD

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列20穴 耐熱温度/60℃ 日本製



洗浄消毒器材

用途に応じて使い分けたい器具用洗浄・消毒器材



ハンドソープ

洗浄と同時に殺菌・消毒
手肌をいたわる低刺激タイプで環境にもやさしい



3kg詰替用ボトル



500ml入ボトル

クリンデント 薬用ハンドソープ

(500ml入ボトル)
(3kg詰替用ボトル)

成分／イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油カリ石鹸、金属イオン封鎖剤(エデト酸塩)
色素(緑色201号、緑色204号) **【日本製】**

生分解度(JIS K3364)が99%以上
で、BOD値は1000倍希釈で
130ppmであり、120~160ppmの
排水基準を満たすには、1100倍以上
の希釈を必要とします。

泡状

無香料

医薬
部外品

原液
使用



手指消毒剤

感染の予防や伝播の防止に
アルコール抵抗性ウイルスにも効果的



速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビショット **【第3類医薬品】** (1000ml入ボトル)

成分／エタノール(C_2H_6O)、リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、
グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニン
エチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩 **＜承認番号22600APX00001＞【日本製】**

弱酸性

手荒れ
防止

速乾性



バキューム
クリーナー

ホースや配管を傷めないバキュームクリーナー



プッシュボトルセット

2リットル詰替用ボトル

1リットルパック、
1リットルボトル、
500ml計量カップ
セット


クリンデント プッシュボトルセット(1リットル) クリンウォッシュ 詰替用(2リットル) 500ml計量カップ

液性／中性 成分／界面活性剤(2%、アルキルトリメチルアンモニウム塩)、グリコール系溶剤、
カルシウム分解剤、血液凝固防止剤、高分子分散剤、トリクロサン、抗菌剤、消泡剤、香料 **【日本製】**

除菌

無リン

経済的な
50倍希釈

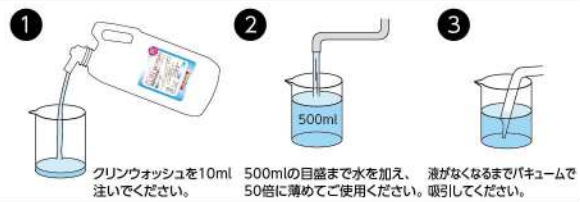

クリンウォッシュを10ml
注いでください。

500mlの目盛まで水を加え、
50倍に薄めてご使用ください。吸引してください。



バキューム
クリーナー

詰まりを防ぎ、吸引力を持続させる
バキュームクリーナー補助剤

「クリンウォッシュ」による処理に
加え、定期的な「クリンウォッシュ
パウダー」の併用により、バイオ
フィルム除去効果が高まると同時
に、持続型抗菌剤が高い抗菌効果
を維持します。



クリンデント クリンウォッシュパウダー (10g×100包)

成分／漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、除菌剤、吸着性抗菌剤、活性化材、酵素、
香料 **【日本製】**

洗浄力


抗菌

安心
成分

非塩素系

*診療終了後に行うと、より効果的に洗浄
できます。

*週に1回の洗浄がオススメです。(より清潔
に保ちたい場合は、2日に1回の洗浄を
オススメします。)

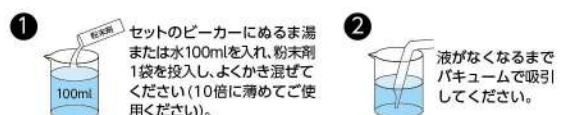

セットのビーカーにぬるま湯
または水100mlを入れ、粉末剤
1袋を投入し、よくかき混ぜて
ください(10倍に薄めてご使
用ください)。

液がなくなるまで
バキュームで吸引
してください。



タンパク質分解酵素と
カルシウム分解剤
界面活性剤で強力洗浄

細菌が潜む汚れを
除去することで、
その後の消毒・滅
菌効果を高めます。

クリンデント エンクリーン (2リットル)

液性/中性 成分/界面活性剤 (8.5%、ポリオキシアルキレン
アルキルエーテル、塩化ベンザルコニウム)、
カルシウム分解剤、蛋白分解酵素、防腐剤、他 日本製

酵素 カルシウム
分解剤 防腐剤 経済的な
100倍希釈



幅広い抗菌スペクトルと
防錆効果の殺菌消毒剤

殺菌消毒剤

クリンデント ウィルクリーン (4リットル)

成分/本品100ml中 日局 ベンゼトニウム塩化物0.2g(0.2%)、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジシクロヘキシルアンモニウム
ナイトライト、亜硝酸ナトリウム <承認番号Z0500AMZ00066> 日本製

医薬品 ベンゼト
ニウム
塩化物 防腐剤 原液~2倍
希釈



ご使用方法

・エンクリーン
・ウィルクリーン

① 水洗い




器具を水でよく洗い
流してください。

② 超音波洗浄 エンクリーン




洗浄後は水で洗い流してください。
※浸漬洗浄(5~10分間)にも使用できます。

③ 液剤処理 ウィルクリーン

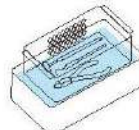

10分以上浸漬してください。

オートクレーブなど
による高温蒸気滅菌

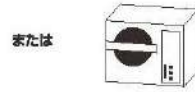

印象材を溶かさず
縮めてはがす

トレイクリーナー

クリンデント トレークイック30 (2リットル)

成分/キレート剤、高濃度塩素 日本製

時間
短縮 収縮 抗菌 原液
使用

- 原液のままご使用ください。
- 処理後は印象材を剥がすように取り除き、流水下で軽くブラシをかけてください。
- 標準処理時間が過ぎましたら、トレーを液からとり出してください。白い沈殿物が
発生したら液を交換してください。
- 液を廃棄する際はフィルターなどを用いて、液だけを廃棄してください。

① 印象 ② 30分 ③ 縮む ④ はがす



標準処理時間	
片顎用網トレー	15~30分
全顎用網トレー	30~60分
片顎用穴あきトレー	45~90分



界面活性剤ゼロ
天然成分でできた衣類洗濯水

クリンデント エコホワイト (2リットル)

液性/中性 成分/ミネラル(スメクタイト、トルマリン、備長炭)、
ハーブ(天然薄荷ハバエクス) EM発酵物質(抗酸化物質) 日本製

天然
成分 界面活性剤
ゼロ

天然成分で環境にも手肌にもやさしい
[界面活性剤ゼロ][石鹸成分ゼロ][ケミカ
ル成分ゼロ]天然ミネラル・EM発酵物質・
ハーブ・大豆酵素など食品に使われる成分
だけで汚れをしっかりと落とします。天然
成分の力で除菌・消臭します。ナマ乾きの
イヤな臭いをシャットアウト!敏感肌に
触れる衣類も安心して洗えます。



診療室はもとよりエアコン内部など手の届かない
所まで安全に防カビ・抗菌処理

防カビ・抗菌

クリンデント モールドブロック (200ml)

成分/ピリジニア系化合物、サルファ剤、ヨウ素化合物、エタノール
噴射ガス/ジメチルエーテル

401種の
菌を阻止 高い
安全性 効果が
持続 エアコン
内部も エアソール
タイプ

3種の有機系抗菌成分の複合効果で、菌表面の酵素・受容体・輸送体の働きを
阻害して失活させ、真菌・細菌・藻類が繁殖できない環境を作り出し、効果が
持続します。経口毒性など極めて安全性が高く、簡単なワンタッチ操作で、
診療室から待合室まで、安心の抗菌空間が生まれます。





植物由来成分主体で手肌にやさしい 万能除菌クリーナー

万能クリーナー



2リットル



スプレーボトル

クリンデント メニークリーン

(2リットル/スプレーボトル付)
(スプレーボトル)液性/アルカリ性 成分/界面活性剤(1%、脂肪系非イオン)、炭酸塩、除菌剤、抗菌剤 日本製

多用途

植物
由来

除菌

抗菌

無リン

3倍
希釈

【希釈液の作り方】

- ①原液をスプレーボトルの矢印まで入れます。
- ②ボトルいっぱいまで水を加え、3倍希釈液を作ります。

【使用方法】

希釈液を汚れた部分に直接スプレーし、
乾いた布で拭きあげてください。
水拭き・2度拭きは不要です。



これ1本で、院内のほとんどの場所に使えるので、用途別に何種類もの洗剤を揃える必要がありません。また、植物由来成分主体なので、手にも環境にもやさしい洗剤です。
【使用できないもの】漆塗りなど鏡面仕上げの家具、表面加工のしていない木部、純毛のじゅうたん、段通、本革、その他漆喰などの水が浸み込むものなど。



外用殺菌消毒薬



日本薬局方 殺菌消毒剤 消毒用エタノール (500ml)

減容
ボトル

ポンプ
装着可

開封日
記入可

<承認番号16100AMZ01533>

日本製

日本薬局方 外用殺菌消毒剤 オキシドール (500ml)

減容
ボトル

開封日
記入可

<承認番号16100AMZ01516>

日本製

外用殺菌消毒剤 ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・70

減容
ボトル

開封日
記入可

<承認番号16100AMZ00572>

日本製

減容ボトルとは、
折りたたんで容積を
減容化して廃棄でき
るよう薄肉・軽量化
した容器です。

超音波洗浄器

錆に強いオールステンレスボディ


180Wでハイパワー＆大型洗浄槽でラクラク洗浄



P12
ウィルソニックⅢと
バスケットが
併用できます

●主な仕様
外形寸法: W390×D285×H310
槽内寸法: W340×D230×H145
槽容量: 約9リットル
外装材質: ステンレスSUS-430
水槽材質: ステンレスSUS-304
タイマー: 最大15分まで
出力: 180W
周波数: 28kHz
日本製

ウィルソニック

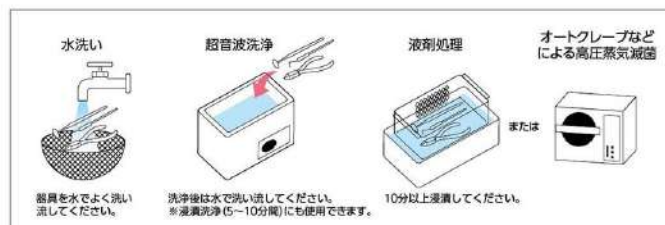

小型器具類の洗浄にぴったりなミニタイプ



カゴ付き

●主な仕様
外形寸法: W263×D163×H225
槽内寸法: W235×D140×H100
外装材質: ステンレスSUS-430
水槽材質: ステンレスSUS-304
タイマー: 最大15分まで
出力: 60W
周波数: 28kHz
日本製

ウィルソニック MINI

シンプル＆強力パワーの超音波洗浄器

500ml
ビーカー付き

●主な仕様
外形寸法: W173×D160×H185
槽内寸法: W153×D140×H65
外装材質: ステンレスSUS-430
水槽材質: ステンレスSUS-316
タイマー: 最大15分まで
出力: 60W
発振周波数: 28kHz
日本製

ウィルソニック LABO

滅菌消毒機器

錆に強いオールステンレス製でワンタッチ操作のフルオートタイプ
扉を開けずに乾燥工程までできます

- ①錆に強いオールステンレスボディ
- ②注水から乾燥までボタンひとつの全自動
- ③滅菌温度をマイコンでコントロール
- ④作業の残り時間をデジタル表示
- ⑤5種類（滅菌のみ・乾燥のみを含む）の工程プログラム
- ⑥トラブル自己診断機能搭載
- ⑦電気系・圧力系に何重にも安全対策
- ⑧ドアロックに内圧を利用した安全設計
- ⑨高性能エアポンプと独自のヒーター制御



P11
ウィルソニックと
バスケットが
併用できます



常時：中心温度 170～180℃
ハンドピース・器具類：
中心温度 130℃



●主な仕様
電源電圧・周波数：AC100V 50/60Hz 15A以上
消費電力：1300W
外形寸法：W440×D526（+50取っ手）×H345
チャンバー寸法：φ220×D360
チャンパー収納能力：18cm丸カスト2個
本体重量：約26kg
滅菌温度：121℃（20～60分）・132℃（5～60分）
乾燥時間：1～60分
圧力計：0～0.4MPa
安全弁作動圧力：0.25MPa
水タンク容量：2.9L
安全装置：安全弁・温度ヒューズ・過電ブレーカー・サーモスタット・
マイコンによるエラー診断
付属品：アミカゴ・スノコ・取扱説明書・運付文書
＜承認番号 220008ZX00195A01＞ 日本製

ウィルクレープⅢ

充分な機能で簡単操作のシンプルタイプ
毎回新しい水を使用し衛生的

- ①5つのモードから選択するだけの簡単操作
滅菌132℃5分（固定）・121℃20分（固定）・乾燥30分（固定）
132℃滅菌乾燥・132℃滅菌のみ・121℃滅菌乾燥・121℃滅菌のみ・乾燥のみ
- ②スタイリッシュで安全性の高いスライド式開閉ハンドル
- ③水タンクのオーバーフローを防止するセンサー付

●主な仕様
電源電圧・周波数：AC100V 50/60Hz
消費電力：1300W
外形寸法：W435×D530（取っ手を含まず）×H345
チャンパー寸法：φ220×D355mm
チャンパー収納能力：18cm丸カスト2個
本体重量：約23kg
滅菌温度：121℃20分（固定）・132℃5分（固定）
乾燥時間：30分（固定）
圧力計：0～0.4MPa
安全弁作動圧力：0.25MPa
水タンク容量：2.9L（水タンクセンサー付）
安全装置：安全弁・温度ヒューズ・過電ブレーカー・
サーモスタット・マイコンによるエラー診断
付属品：アミカゴ・計量カップ・取扱説明書・運付文書
＜承認番号 220008ZX00196000＞ 日本製



サンクレープ

セルフシール方式で簡単に使える滅菌パック

- L** Lサイズ
190mm×330mm（内寸約165mm×270mm）
（200枚入）
- M** Mサイズ
140mm×260mm（内寸約120mm×240mm）
（200枚入）
- S** Sサイズ
90mm×260mm（内寸約70mm×240mm）
（200枚入）
- SS** SSサイズ
57mm×130mm（内寸約34mm×75mm）
（200枚入）



オートクレープ滅菌後は
矢印が黒に変ります
E.O.ガス滅菌後は
矢印が茶色に変ります

※滅菌終了後インジケータの色が
変わります。

クリンデント セルフシール滅菌パック

低コスト ロング
セラー サイズ展開
4 種類 ディスポ

左右別形態のプラスチックグローブ
アレルギー対策にも最適



プラスティカ100 (100枚入)

サイズ: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 (左右別)

アレルギー
対策

パウダー
フリー

プラス
チック



* 国内最小規格

低価格で使いやすいグローブ

**クリンデント
クリングローブ・エコ**

(100枚入)

サイズ: SSS, SS, S, M, L

(許可番号 13B2X00065000002)



パウダー
フリー

ラテックス

SSS
サイズ

3次元フォルムのウィングカット D4シリーズ

ウィングカットは特殊な立体裁断で、両側面に隙間ができず顔に自然にフィットします。
Vカット特殊加工で口元のベタつき、メガネの曇りを防止します。



Mサイズ: 145mm
Lサイズ: 175mm

耳掛け Mサイズ: 210mm
Lサイズ: 200mm



Mサイズ: 145mm
Lサイズ: 175mm

デントマスク D4 (50枚入)

日本製

アレルギー
テスト済み

抗菌
脱臭

3D

5層

Mサイズ

ホワイト

ピンク

ブルー

Lサイズ

ホワイト

ブルー

ディスポマスク D4 (50枚入)

日本製

アレルギー
テスト済み

3D

4層

Mサイズ

ピンク

ブルー

Lサイズ

ピンク

ブルー

高品質、高質感の衛生マスク

マスクの中に内蔵されたネットが形崩れを防ぎます。



Mサイズ: 145mm
Lサイズ: 175mm

クリンマスク (50枚入)

日本製

アレルギー
テスト済み

高質感

4層

Mサイズ

ピンク

Lサイズ


ホワイト

ブルー

※全ての方にアレルギーが
起こらないとは限りません。

クリーンな診療環境づくりをお手伝い 患者さんからのイメージアップにつながります

立体裁断で患者さんの肩を包み込む
大きなエプロン

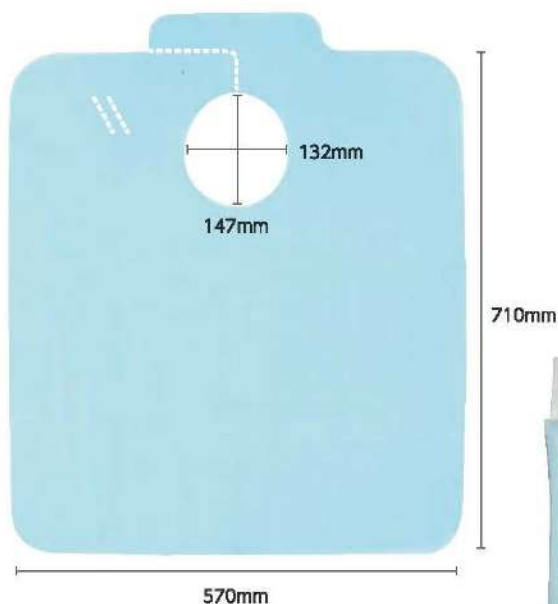

表面給水加工・
裏面防水加工




お〜きいエプロン (100枚入)

日本製

高品質 高質感 ビッグサイズ 厚ラミネート 抗菌パッケージ

小型タイプながら高機能のデンタルエプロン

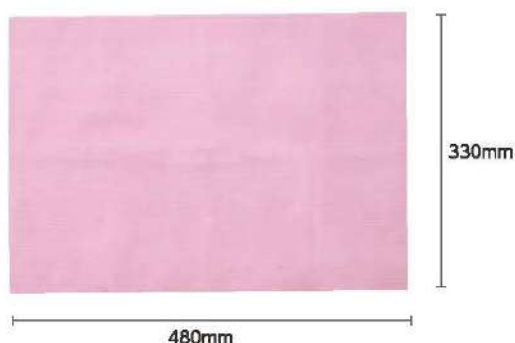

表面給水加工・
裏面防水加工



■ カラー ブルー イエロー ラベンダー ピンク



クリンエプロン プチ (Petit) (500枚入)

エンボス加工 高吸収 高防水 補強加工

清潔感ある紙コップで患者さんもニコリ

オードソックスな白に

診療室の雰囲気と和ませるカラーアソート。

容量はどちらも 5 オンス (約150ml) です。



クリンデント
ニュークリンカップ (600 個入)
(3,000 個入)



クリンデント
ニュークリンカップ カラーアソート (600 個入)
(3,000 個入)

コップを汚物入れに活用



直径 69mm



※紙コップの開口部の直径は、各社で異なります。初めてご採用の際にはサンプルのご請求をおすすめします。

クリンデント
クリンカップ (300 枚入)

ソフトな感触でしっかりとした吸水性



化粧箱はカルテ保存BOX
として使用できます。
(B5サイズ)

クリンデント ロールメン

●サイズ/入数

S: $\phi 8.5 \times 25\text{mm}$ / 2,750本入
M: $\phi 10 \times 30\text{mm}$ / 2,000本入

EOG
滅菌済

高吸水性

毛羽立ち
にくい

【日本製】

毎日の使用にうれしい良質カクメン



クリンデント カクメン

●サイズ/入数

(届出番号 13B3X00207000002) 【日本製】

#3: $30 \times 30\text{mm}$ / 約 4,600枚入 (500g)

#4: $40 \times 40\text{mm}$ / 約 2,600枚入 (500g)

#5: $50 \times 50\text{mm}$ / 約 1,700枚入 (500g)

EOG
滅菌済

高吸水性

毛羽立ち
にくい

経済的な DISPOSABLE タイプの紙製ヘッドレストカバー



スモールサイズ
直径約 190mm



ラージサイズ
直径約 250mm

クリンデント ヘッドレストカバー

スモールサイズ (50 枚入)
ラージサイズ (50 枚入)

低コスト


サイズ展開
2種類

DISPO

※ヘッドレストカバーの直径の大きさに種類があります。初めてご採用の際にはサンプルのご請求をおすすめします。

診療用器材

- ・優れた耐錆性と弾性・無影灯の光に反射しないサテン加工・ステンレススチール1.4024使用

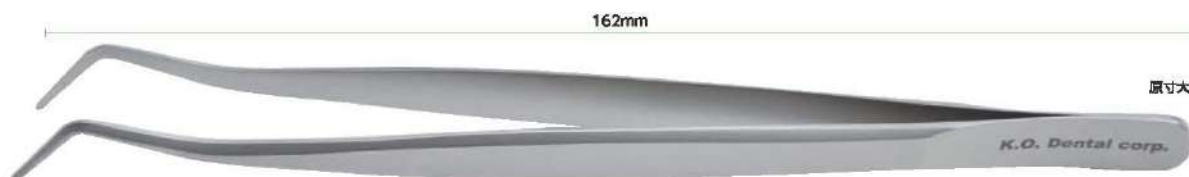

K.O.治療ピンセットSB

〈届出番号 13B1X10089000911〉

Made in
Poland

- ・真鍮製・国産ミラー規格に対応(一部商品を除く)



【規格: No.4-48UNF 0.5292mm】

ミラーホルダーライト

(5本入)

〈届出番号 13B1X10089000913〉 日本製

- ・二重映りのないクリアな反射
- ・ロジウムコーティングにより曇りにくく、優れた耐久性

反射率が高くクリアな視界



クリンデント フロントサーフェスミラー No.4 (12本入)

〈届出番号 13B1X10089000525〉

※オートクレープでの乾燥行程はお避けください。

134℃ 低コスト ロジウムコーティング 表面反付



クリンデント ミラートッププレーンNo.4 (20個入)

〈届出番号 13B1X10089000912〉

※オートクレープでの乾燥行程はお避けください。

134℃ 低コスト

やわらかい感触のシリコンチップ

自在に曲げられるディスプレイザブル排唾管



クリンデント シリコンバキュームチップ (10個入)

〈届出番号 18B3X10004000004〉 日本製

※オートクレープでの乾燥行程はお避けください。

200℃ 耐薬品性 やさしい感触



クリンエジェクター

(100本入)

〈届出番号 27B2X00268000007〉

従来品のワイヤーは1mm弱でしたが、クリンエジェクターは1.4mmにしたことにより曲げた角度をしっかりと維持できます。

手間を省いたプリカットタイプもある咬合紙


クリンデント アーティキュレーティングペーパー

- ①シート 120×22mm、厚さ35μm (120枚入)
- ②1/2カット 60×22mm、厚さ35μm (240枚入)
- ③1/3カット 40×22mm、厚さ35μm (360枚入)
- ④1/4カット 30×22mm、厚さ35μm (480枚入)

低コスト サイズ 4種類 ■ カラー 赤 青



セメント等を練りやすく工夫した合成紙ユボを採用

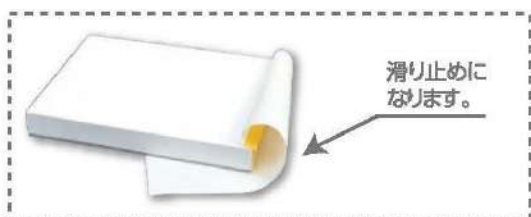

合成紙ユボとは？

ポリプロピレンを主原料として作られた合成紙です。均一ななめらかさをもつ表面性状で、耐水性に優れ破れにくいという特長があります。
また、紙粉がほとんど発生しないため、セメントに余分な成分が混ざりません。燃やしても有毒な塩素ガスなどは発生せず、資源として再利用もできるエコ素材です。

スタンダードサイズ



クリンデント
ユボマット (100枚×3入)

日本製


エコノミーサイズ



クリンデント
ユボマットミニ (100枚×3入)

日本製

使いやすい菱形のミキシングペーパー

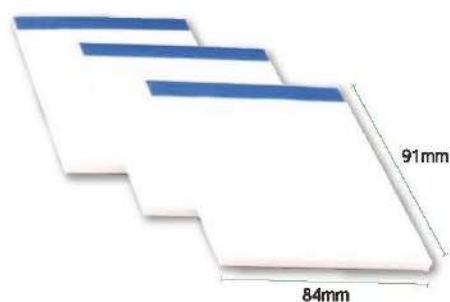

クリンデント
ミキシングペーパー (100枚×3入)

日本製

鮮やかなパステルカラーで幅広いラインアップ！
ボンディングやエッチングの塗布に便利なマイクロブラシです



クリンアプリーター (100本入)

(届出番号 27B2X00268000013)

ディスボ 液ダレ防止 ■ カラー レギュラー ファイン ウルトラファイン


手になじみやすい形状の 寒天シリンジ



スーパーカートリッジ・シリンジ (1本入)

170℃ 軽量

〈医療機器届出番号 11B2X00019KO1003〉 日本製

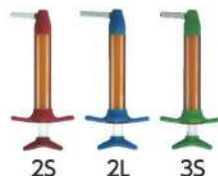

クリンアートシリンジ



(1本入)

140℃

〈医療機器届出番号 11B2X00019KO1005〉 日本製

スーパーカートリッジ シリンジ シリンジ針 (20G/18G 2入)	スーパーカートリッジ シリンジ シリンジ清掃針 (2入)	クリンアートシリンジ フック (1個入)	クリンアートシリンジ リングセット (1個入)	クリンアートシリンジ ヘッド (1個入)	クリンアートシリンジ ボディ (1個入)	クリンアートシリンジ ピストン (1個入)	クリンアートシリンジ ヘッドキャップ (1個入)
		●サイズ/2S, 2L, 3S		●サイズ/2S, 2L, 3S		●サイズ/2S, 2L, 3S	●サイズ/2S, 2L, 3S

遠赤外線寒天コンディショナー 2ステージフルオートタイプ



遠赤ウォーマー KODEC-5



〈一般医療機器届出番号 11B2X00019KOD001〉

質の高い天然の天草を主原料とした寒天印象材



衛生的な
1本包装

キャニオンコロイド シリンジタイプ(5/16) (60本入)

日本製



キャニオンコロイド カートリッジタイプ(48本入)

日本製



〈医療機器届出番号 219ADBZX00022000号〉

寒天とよく馴染み、ポスト印象採得時の補強や 石膏注入時のポスト変形を防ぐ



コロイドピン

(20本入)

〈届出番号 11B2X00019KO1004〉 日本製

全長150mmの
お徳用サイズ



■ カラー	赤	緑	黒
■ ワイヤ太さ	0.2mm	0.25mm	0.3mm
■ 外径	1.3φ	1.4φ	1.5φ

ケアストリーム社製の高画質なパノラマフィルム、オルソシステムにも対応



レギュラーシステム
対応

クリンデント
レギュラーパノラマフィルムCD-RPF(15×30cm 50枚入)

〈届出番号 13B2X10060060000〉

高画質 シャープな
画像



オルソシステム
(希土類) 対応

クリンデント
オルソパノラマフィルムCD-OPF(15×30cm 50枚入)

〈届出番号 13B2X10060060000〉

高感度 高鮮鋭度

そのまま使う使用液タイプの自動現像機用現像・定着液



使いやすい
入れるだけの
使用液タイプ

クリンデント
自動現像機用現像液CD-D(1リットル×6入)

日本製

希釈
不要 品質を保つ
パウチ袋




各社の
自動現像機に
そのまま使用
できます


クリンデント
自動現像機用定着液CD-F(1リットル×6入)

日本製

希釈
不要 品質を保つ
パウチ袋

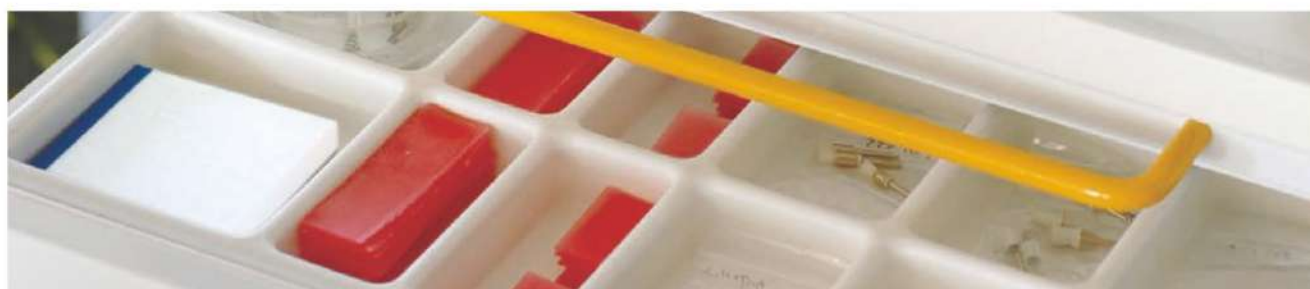

スムーズな軟化と適度な粘り・伸びがあるパラフィンワックス シンプルで使いやすいカルテ用ファイル

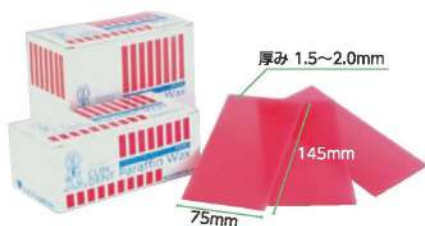

蜜蝋の量を多めに配合し、適度な粘りと気温の低い季節でも
割れにくい製品に仕上げている高品質パラフィンワックスです。

クリンデント パラフィンワックス (500g入)
(1000g入)

〈届出番号 13B2X00065000088〉




デンタルファイル

日本製

KDF-2 (B5変形) カラー：グリーン/レッド/クリア (50枚入)
KDF-A4 (A4) カラー：クリア (50枚入)
KDF-3/A4 (A4・ポケット付) カラー：クリア (50枚入)

世界が認めた品質「アンテオス」

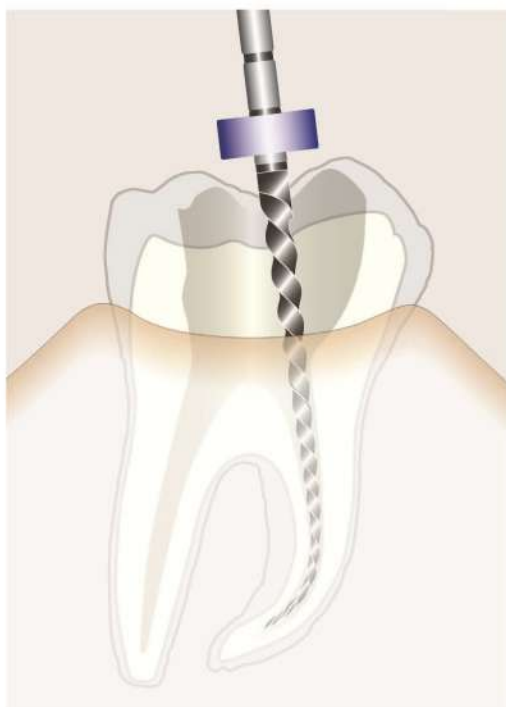

1969年創業のドイツ ミュンヘンに本社を置くVDW社は、世界で最も歴史のある歯科用根管治療具の専門メーカーです。「アンテオス」は、質の高いステンレススチール製の根管治療用手用ファイルです。

134°C 耐久性 適度なしなり ストッパー付き

Size List (リーマ/Hファイル/Kファイル)

色	21mm	25mm	28mm	31mm
■	08	08	08	08
■	10	10	10	10
□	15	15	15	15
■	20	20	20	20
■	25	25	25	25
■	30	30	30	30
■	35	35	35	35
■	40	40	40	40
□	45	45	45	45
■	50	50	50	50
■	55	55	55	55
■	60	60	60	60
■	70	70	70	70
■	80	80	80	80
□	90	—	—	—
■	100	—	—	—
■	110	—	—	—
■	—	120	—	120
■	—	130	—	130
■	—	140	—	140

ASSORT

15-40

45-80

90-110 (21mm以外は在庫限りの販売となります)

*90番以上のものにはストッパーがついておりません。

▲ リーマ

08,10 (6本入)
15~40 (6本入)
45~80 (6本入)
90~140 (6本入)

(届出番号 13BZX00065000025)

先端部



● Hファイル

08,10 (6本入)
15~40 (6本入)
45~80 (6本入)
90~140 (6本入)

(届出番号 13BZX00065000024)



■ Kファイル

08,10 (6本入)
15~40 (6本入)
45~80 (6本入)
90~140 (6本入)

(届出番号 13BZX00065000023)



ピーソリーマ

No.1~No.6 CA用(19mm) (6本入)

(承認番号 22000BZX00490000)



ゲーツドリル

No.1~No.6 CA用(19mm) (6本入)

(承認番号 22000BZX00497000)



エンジンリーマ 21mm/25mm/28mm

15~40 (6本入)

45~80 (6本入)


(承認番号 22000BZX00487000)

信頼の品質「ダイアデント」

ガッタパーチャ本体にミリマークのラインが施され根管長の計測がしやすく充填に便利です。

Size List

色	28mm	入り数(ガッタパーチャポイント)	入り数(ペーパーポイント)
□ 15		60本	
■ 20			
■ 25			
■ 30			
■ 35			
■ 40			
□ 45		120本	300本
■ 50			
■ 55			
■ 60			
■ 70			
■ 80			
□ 90			
■ 100			
■ 110		60本	120本
■ 120			
■ 130			
■ 140			
ASSORT			
25-40		120本	300本
45-80			
90-140		60本	-

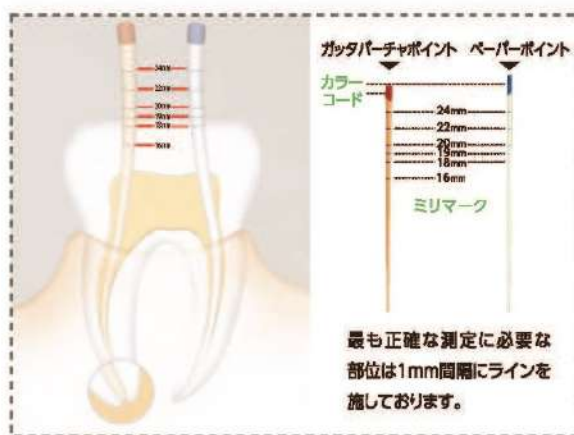

ダイアデント ガッタパーチャポイント (カラーコード・ミリマーク付)
25~100 (120本入)
15,20,110~140 (60本入)

〈部価番号 224AKBZX00095000〉



ダイアデント ペーパーポイント (カラーコード・ミリマーク付)
15~80 (300本入)
90~140 (120本入)



ダイアデント アクセサリーポイント
細・細小・細中・細大・小・中・太・太小・太中・太大・特・混合 (小・中・大)
(各150本入)

〈部価番号 224AKBZX00095000〉



アンテオス カラーコード シリコン・ストッパー
(200個入)



1個ずつ取り出せるスライド式ケース入りのシリコンエンドストッパーで、カラーコード対応です。



アンテオス インテリム・スタンド

250℃

薬液はもちろん、250℃の高温にも耐えられます。ジスクも一度だけはオートクレーブ滅菌でき、薬液を入れておくことも可能です。

補充用ジスク インテリム・スタンド用 フォームジスク
(55枚入)



高品質の天然ダイヤモンドを高密度に電着



P27
形態表を
ご参照ください

K.O.ダイヤモンド (5本入)

(医療機器届出番号 09B1X00006002010) 日本製

126°

切削能力に優れた満足できるこの一本



カーバイドバー

A形態 (10本入)
B形態 (10本入)
C形態 (10本入)



P28
形態表を
ご参照ください

[A形態]
1/4・1/2・1・2・3・4・5・6・7・8・331/2・34・35・36・37・57・58・169L・170・171・172・245・330・331・
332・557・558・559・560・699・700・701・701L・702・703・1157・1158・1159・1557・1558・1559
[B形態]
M16DB・M14CF・701X・M21DC・M23DC・M15EZ・M15ZB
[C形態]
7408・7901・7902・7903・KGW1(1931)・1957・KGW2(1958)・1970

126°

(医療機器届出番号 09B1X00006003010) 日本製

豊富なバリエーションがそろったポイント類

126℃

P29・30
形態表を
ご参照ください

切削阻害の原因となる表層を1層削り出しているため、
開封後から直ちに高い切削効率が得られます。

カーボランダムポイント

(12本入)

(72本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006004010〉 日本製

シリコンポイントM2 (細粒)

シリコンポイントM3 (微粒)

(12本入)

(72本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006005010〉 日本製

ホワイトアラウンドポイント

(12本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006004010〉 日本製

シリコンカップM2 (細粒)

シリコンカップM3 (微粒)

シリコンカップCタイプ

(12本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006005010〉 日本製

切削能力が高く優れた操作性

- ・切削効率の高いシャープな刃先を採用。
- ・チャック部分へのエアダストの侵入を防ぐユニディスク付き。

カーバイドカッターHP



134℃

ユニディスク
付き

低コスト

〈届出番号 13B1X10089000551〉



ユニディスク付き (全ての商品に付いております)
ユニディスクはオートクレーブ不可 ※滅菌時はバーから外してください

P31・32
形態表を
ご参照ください

ジルコニアカッターHP

〈届出番号:13B1X10089001017〉



チタンコーティングカッターHP

〈届出番号:13B1X10089001018〉

マルチレイヤー
ダイヤモンドバーHP

〈届出番号:13B1X10089001019〉

リムダイヤ
ホイールHP

〈届出番号:13B1X10089001020〉



134℃

ユニディスク
付き

低コスト

選べて使える石膏ラインアップ

弊社の製品には、品質の安定性に優れた良質な高級化学石膏が使用されています。

特に高い精度が求められる作業模型に最適な超硬石膏

硬化膨張率
(2時間後)
0.06%



超硬石膏
クリンロック

3kg入パック(1.5kg×2)

〈届出番号 11B3X00042000024〉 日本製

高精度

高強度

高適合性

■カラー

ブラウン

膨張率0.08%の精密さで優れたダストフリータイプ

硬化膨張率
(2時間後)
0.08%



硬石膏
ニューストーン DFL

18kg入ボックス(1.5kg×12)

4.5kg入パック(1.5kg×3)

〈届出番号 11B3X00042000006〉 日本製

高精度

適合性

ダスト
フリー

■カラー

イエロー

ブルー

硬化がシャープで初期強度が高く安定した品質です

硬化膨張率
(2時間後)
0.20%



硬石膏
クリンストーン

20kg入ボックス(2.5kg×8)

10kg入エコボックス(2.5kg×4)

5kg入パック(2.5kg×2)

ホワイトは3kg入パックのみ(1.5kg×2)

〈一般医療機器・届出番号 11B3X00042000005〉 日本製

チクトロピー
性

緻密で
滑沢

■カラー

イエロー

ブルー

ホワイト

アルファ石膏配合により強度が高く様々な用途に使えます

硬化膨張率
(2時間後)
0.26%



普通石膏
クリンプラスター

5kg入パック(5kg×1)

〈届出番号 11B3X00042000025〉 日本製

べた付き
にくい


■カラー

ホワイト

高級化学石膏

化学合成によって造られるため非常に純度が高く、高白色度です。
不純物の混入が無く、粒度が均一で安定しています。
原料ロットごとの品質に差がありません。

硬化膨張の推移

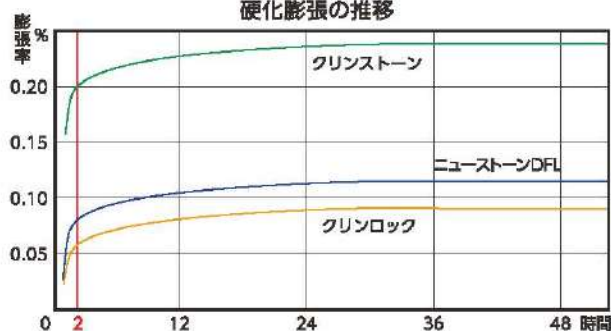

技工関連器材

納得の高品質で安心の低価格

#9 ソフト
原寸大



φ14.2mm

#11 ソフト
原寸大



φ17.4mm



クリンデント
ロビンソンブラシ

#11ソフト(20本入)
#9ソフト(20本入)

《届出番号 27B3X00091000030》

高作業性

経済的

高品質・片面／両面タイプのダウエルピン



ダウエルピンシルバー (1000本入)


両面カット／片面カット

良質な
クロムメッキ

両面カット

片面カット

補綴物に付着したルーージュなどを強力に落とす

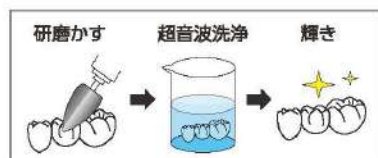

5～6倍
希釈

ルーージュクリーナー

(1リットル)

日本製

わずかな分量で効果的な研磨が可能です



研磨前



研磨後

ジルグロウ ジルコニア／セラミック用研磨剤 40g

《届出番号 13B1X10089000953》 日本製

吸水性のあるノンアスベストリボン



キャストリボン

本体サイズ：1.0mm×32mm×30m

日本製

キャストリボン S

本体サイズ：0.5mm×32mm×30m

日本製

オーラルケア

洗浄消毒・衛生

診療用器材

石膏・技工

各種形態表