

洗浄消毒器材

用途に応じて使い分けたい器具用洗浄・消毒器材



ハンドソープ

洗浄と同時に殺菌・消毒
手肌をいたわる低刺激タイプで環境にもやさしい



3kg詰替用ボトル



500ml入ボトル

クリンデント 薬用ハンドソープ

(500ml入ボトル)
(3kg詰替用ボトル)

成分／イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油カリ石鹸、金属イオン封鎖剤(エデト酸塩)
色素(緑色201号、緑色204号) **【日本製】**

生分解度(JIS K3364)が99%以上
で、BOD値は1000倍希釈で
130ppmであり、120~160ppmの
排水基準を満たすには、1100倍以上
の希釈を必要とします。

泡状

無香料

医薬
部外品

原液
使用



手指消毒剤

感染の予防や伝播の防止に
アルコール抵抗性ウイルスにも効果的



速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビショット **【第3類医薬品】** (1000ml入ボトル)

成分／エタノール(C_2H_6O)、リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、
グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニン
エチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩 **＜承認番号22600APX00001＞【日本製】**

弱酸性

手荒れ
防止

速乾性



バキューム
クリーナー

ホースや配管を傷めないバキュームクリーナー



プッシュボトルセット

2リットル詰替用ボトル

1リットルパック、
1リットルボトル、
500ml計量カップ
セット


クリンデント プッシュボトルセット(1リットル) クリンウォッシュ 詰替用(2リットル) 500ml計量カップ

液性／中性 成分／界面活性剤(2%、アルキルトリメチルアンモニウム塩)、グリコール系溶剤、
カルシウム分解剤、血液凝固防止剤、高分子分散剤、トリクロサン、抗菌剤、消泡剤、香料 **【日本製】**

除菌

無リン

経済的な
50倍希釈

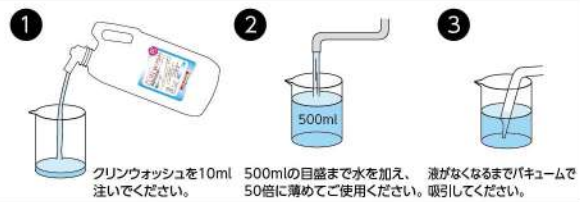

クリンウォッシュを10ml
注いでください。

500mlの目盛まで水を加え、
50倍に薄めてご使用ください。吸引してください。



バキューム
クリーナー

詰まりを防ぎ、吸引力を持続させる
バキュームクリーナー補助剤

「クリンウォッシュ」による処理に
加え、定期的な「クリンウォッシュ
パウダー」の併用により、バイオ
フィルム除去効果が高まると同時
に、持続型抗菌剤が高い抗菌効果
を維持します。



クリンデント クリンウォッシュパウダー (10g×100包)

成分／漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、除菌剤、吸着性抗菌剤、活性化材、酵素、
香料 **【日本製】**

洗浄力


抗菌

安心
成分

非塩素系

*診療終了後に行うと、より効果的に洗浄
できます。

*週に1回の洗浄がオススメです。(より清潔
に保ちたい場合は、2日に1回の洗浄を
オススメします。)

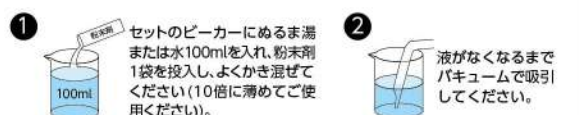

1
100ml

セットのビーカーにぬるま湯
または水100mlを入れ、粉末剤
1袋を投入し、よくかき混ぜて
ください(10倍に薄めてご使
用ください)。

2
液がなくなるまで
バキュームで吸引
してください。



タンパク質分解酵素と
カルシウム分解剤
界面活性剤で強力洗浄

細菌が潜む汚れを
除去することで、
その後の消毒・滅
菌効果を高めます。

クリンデント エンクリーン (2リットル)

液性/中性 成分/界面活性剤 (8.5%、ポリオキシアルキレン
アルキルエーテル、塩化ベンザルコニウム)、
カルシウム分解剤、蛋白分解酵素、防腐剤、他 日本製

酵素 カルシウム
分解剤 防腐剤 経済的な
100倍希釈



幅広い抗菌スペクトルと
防錆効果の殺菌消毒剤

殺菌消毒剤

クリンデント ウイルクリーン (4リットル)

成分/本品100ml中 日局 ベンゼトニウム塩化物0.2g(0.2%)、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジシクロヘキシルアンモニウム
ナイトライト、亜硝酸ナトリウム <承認番号Z0500AMZ00066> 日本製

医薬品 ベンゼト
ニウム
塩化物 防腐剤 原液~2倍
希釈



ご使用方法

・エンクリーン
・ウイルクリーン

① 水洗い




器具を水でよく洗い
流してください。

② 超音波洗浄 エンクリーン



洗浄後は水で洗い流してください。
※浸漬洗浄(5~10分間)にも使用できます。

③ 液剤処理 ウイルクリーン

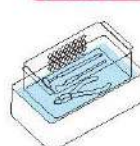

10分以上浸漬してください。

オートクレーブなど
による高温蒸気滅菌



印象材を溶かさず
縮めてはがす

トレイクリーナー

クリンデント トレークワイック30 (2リットル)

成分/キレート剤、高濃度塩素 日本製

時間
短縮 収縮 抗菌 原液
使用

- 原液のままご使用ください。
- 処理後は印象材を剥がすように取り除き、流水下で軽くブラシをかけてください。
- 標準処理時間が過ぎましたら、トレーを液からとり出してください。白い沈殿物が
発生したら液を交換してください。
- 液を廃棄する際はフィルターなどを用いて、液だけを廃棄してください。



標準処理時間	
片顎用網トレー	15~30分
全顎用網トレー	30~60分
片顎用穴あきトレー	45~90分



界面活性剤ゼロ
天然成分でできた衣類洗濯水

クリンデント エコホワイト (2リットル)

液性/中性 成分/ミネラル(スメクタイト、トルマリン、備長炭)、
ハーブ(天然薄荷ハバエクス) EM発酵物質(抗酸化物質) 日本製

天然成分 界面活性剤
ゼロ 天然成分で環境にも手肌にもやさしい
[界面活性剤ゼロ][石鹼成分ゼロ][ケミカル成分ゼロ]天然ミネラル・EM発酵物質・
ハーブ・大豆酵素など食品に使われる成分
だけで汚れをしっかりと落とします。天然
成分の力で除菌・消臭します。ナマ乾きの
イヤな臭いをシャットアウト!敏感肌に
触れる衣類も安心して洗えます。



診療室はもとよりエアコン内部など手の届かない
所まで安全に防カビ・抗菌処理

防カビ・抗菌

クリンデント モールドブロック (200ml)

成分/ピリジニア系化合物、サルファ剤、ヨウ素化合物、エタノール
噴射ガス/ジメチルエーテル

401種の
菌を阻止 高い
安全性 効果が
持続 エアコン
内部も エアソール
タイプ

3種の有機系抗菌成分の複合効果で、菌表面の酵素・受容体・輸送体の働きを
阻害して失活させ、真菌・細菌・藻類が繁殖できない環境を作り出し、効果が
持続します。経口毒性など極めて安全性が高く、簡単なワンタッチ操作で、
診療室から待合室まで、安心の抗菌空間が生まれます。





植物由来成分主体で手肌にやさしい 万能除菌クリーナー

万能クリーナー



2リットル



スプレーボトル

クリンデント メニークリーン

(2リットル/スプレーボトル付)
(スプレーボトル)液性/アルカリ性 成分/界面活性剤(1%、脂肪系非イオン)、炭酸塩、除菌剤、抗菌剤 日本製

多用途

植物
由来

除菌

抗菌

無リン

3倍
希釈

【希釈液の作り方】

- ①原液をスプレーボトルの矢印まで入れます。
- ②ボトルいっぱいまで水を加え、3倍希釈液を作ります。

【使用方法】

希釈液を汚れた部分に直接スプレーし、
乾いた布で拭きあげてください。
水拭き・2度拭きは不要です。



これ1本で、院内のほとんどの場所に使えるので、用途別に何種類もの洗剤を揃える必要がありません。また、植物由来成分主体なので、手にも環境にもやさしい洗剤です。
【使用できないもの】漆塗りなど鏡面仕上げの家具、表面加工のしていない木部、純毛のじゅうたん、段通、本革、その他漆喰などの水が浸み込むものなど。



外用殺菌消毒薬



日本薬局方 殺菌消毒剤 消毒用エタノール (500ml)

減容
ボトル

ポンプ
装着可

開封日
記入可

<承認番号16100AMZ01533>

日本製

日本薬局方 外用殺菌消毒剤 オキシドール (500ml)

減容
ボトル

開封日
記入可

<承認番号16100AMZ01516>

日本製

外用殺菌消毒剤 ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・70

減容
ボトル

開封日
記入可

<承認番号16100AMZ00572>

日本製

減容ボトルとは、
折りたたんで容積を
減容化して廃棄でき
るよう薄肉・軽量化
した容器です。

超音波洗浄器

錆に強いオールステンレスボディ


180Wでハイパワー＆大型洗浄槽でラクラク洗浄



P12
ウィルソニックⅢと
バスケットが
併用できます

●主な仕様
外形寸法: W390×D285×H310
槽内寸法: W340×D230×H145
槽容量: 約9リットル
外装材質: ステンレスSUS-430
水槽材質: ステンレスSUS-304
タイマー: 最大15分まで
出力: 180W
周波数: 28kHz
日本製

ウィルソニック

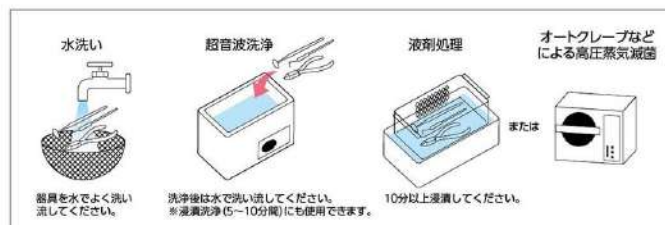

小型器具類の洗浄にぴったりなミニタイプ



ウィルソニック MINI

●主な仕様
外形寸法: W263×D163×H225
槽内寸法: W235×D140×H100
外装材質: ステンレスSUS-430
水槽材質: ステンレスSUS-304
タイマー: 最大15分まで
出力: 60W
周波数: 28kHz
日本製

シンプル＆強力パワーの超音波洗浄器



ウィルソニック LABO

●主な仕様
外形寸法: W173×D160×H185
槽内寸法: W153×D140×H65
外装材質: ステンレスSUS-430
水槽材質: ステンレスSUS-316
タイマー: 最大15分まで
出力: 60W
発振周波数: 28kHz
日本製

滅菌消毒機器

錆に強いオールステンレス製でワンタッチ操作のフルオートタイプ
扉を開けずに乾燥工程までできます

- ① 錆に強いオールステンレスボディ
- ② 注水から乾燥までボタンひとつの全自動
- ③ 滅菌温度をマイコンでコントロール
- ④ 作業の残り時間をデジタル表示
- ⑤ 5種類（滅菌のみ・乾燥のみを含む）の工程プログラム
- ⑥ トラブル自己診断機能搭載
- ⑦ 電気系・圧力系に何重にも安全対策
- ⑧ ドアロックに内圧を利用した安全設計
- ⑨ 高性能エアポンプと独自のヒーター制御



P11
ウィルソニックと
バスケットが
併用できます



常時：中心温度 170～180℃
ハンドピース・器具類：
中心温度 130℃



●主な仕様
電源電圧・周波数：AC100V 50/60Hz 15A以上
消費電力：1300W
外形寸法：W440×D526（+50取っ手）×H345
チャンバー寸法：φ220×D360
チャンパー収納能力：18cm丸カスト2個
本体重量：約26kg
滅菌温度：121℃（20～60分）・132℃（5～60分）
乾燥時間：1～60分
圧力計：0～0.4MPa
安全弁作動圧力：0.25MPa
水タンク容量：2.9L
安全装置：安全弁・温度ヒューズ・過電ブレーカー・サーモスタット・
マイコンによるエラー診断
付属品：アミカゴ・スノコ・取扱説明書・運付文書
＜承認番号 220008ZX00195A01＞ 日本製

ウィルクレープⅢ

充分な機能で簡単操作のシンプルタイプ
毎回新しい水を使用し衛生的

- ① 5つのモードから選択するだけの簡単操作
滅菌132℃5分（固定）・121℃20分（固定）・乾燥30分（固定）
132℃滅菌乾燥・132℃滅菌のみ・121℃滅菌乾燥・121℃滅菌のみ・乾燥のみ
- ② スタイリッシュで安全性の高いスライド式開閉ハンドル
- ③ 水タンクのオーバーフローを防止するセンサー付

●主な仕様
電源電圧・周波数：AC100V 50/60Hz
消費電力：1300W
外形寸法：W435×D530（取っ手を含まず）×H345
チャンパー寸法：φ220×D355mm
チャンパー収納能力：18cm丸カスト2個
本体重量：約23kg
滅菌温度：121℃20分（固定）・132℃5分（固定）
乾燥時間：30分（固定）
圧力計：0～0.4MPa
安全弁作動圧力：0.25MPa
水タンク容量：2.9L（水タンクセンサー付）
安全装置：安全弁・温度ヒューズ・過電ブレーカー・
サーモスタット・マイコンによるエラー診断
付属品：アミカゴ・計量カップ・取扱説明書・運付文書
＜承認番号 220008ZX00196000＞ 日本製



サンクレープ

セルフシール方式で簡単に使える滅菌パック

L Lサイズ 190mm×330mm（内寸約165mm×270mm） （200枚入）	
M Mサイズ 140mm×260mm（内寸約120mm×240mm） （200枚入）	
S Sサイズ 90mm×260mm（内寸約70mm×240mm） （200枚入）	
SS SSサイズ 57mm×130mm（内寸約34mm×75mm） （200枚入）	

オートクレープ滅菌後は
矢印が黒に変わります

E.O.ガス滅菌後は
矢印が茶色に変わります

※滅菌終了後インジケータの色が
変わります。

クリンデント セルフシール滅菌パック

低コスト ロング
セラー サイズ展開
4 種類 ディスポ

左右別形態のプラスチックグローブ
アレルギー対策にも最適



プラスティカ100 (100枚入)

サイズ: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 (左右別)

アレルギー
対策

パウダー
フリー

プラス
チック



*国内最小規格

低価格で使いやすいグローブ

**クリンデント
クリングローブ・エコ**

(100枚入)

サイズ: SSS, SS, S, M, L

(許可番号 13B2X00065000002)



パウダー
フリー

ラテックス

SSS
サイズ

3次元フォルムのウィングカット D4シリーズ

ウィングカットは特殊な立体裁断で、両側面に隙間ができず顔に自然にフィットします。
Vカット特殊加工で口元のベタつき、メガネの曇りを防止します。



Mサイズ: 145mm
Lサイズ: 175mm

耳掛け Mサイズ: 210mm
Lサイズ: 200mm



Mサイズ: 145mm
Lサイズ: 175mm

デントマスク D4 (50枚入)

日本製

アレルギー
テスト済み

抗菌
脱臭

3D

5層

Mサイズ

ホワイト

ピンク

ブルー

Lサイズ

ホワイト

ブルー

ディスポマスク D4 (50枚入)

日本製

アレルギー
テスト済み

3D

4層

Mサイズ

ピンク

ブルー

Lサイズ

ピンク

ブルー

高品質、高質感の衛生マスク

マスクの中に内蔵されたネットが形崩れを防ぎます。



Mサイズ: 145mm
Lサイズ: 175mm

クリンマスク (50枚入)

日本製

アレルギー
テスト済み

高質感

4層

Mサイズ

ピンク

ブルー

Lサイズ


ホワイト

ブルー

※全ての方にアレルギーが
起こらないとは限りません。

クリーンな診療環境づくりをお手伝い 患者さんからのイメージアップにつながります

立体裁断で患者さんの肩を包み込む
大きなエプロン

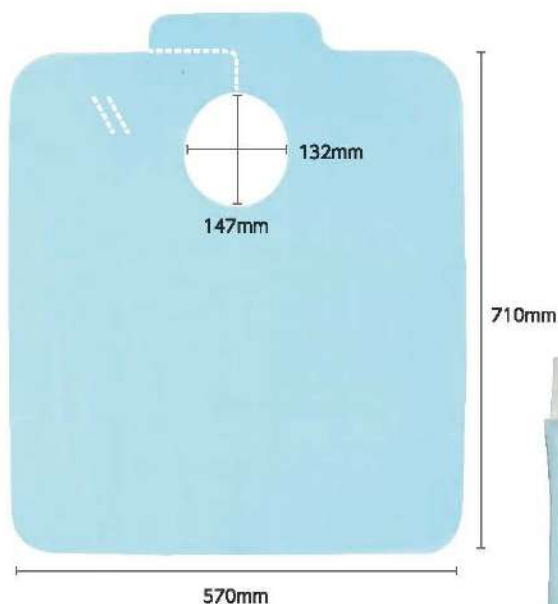

表面給水加工・
裏面防水加工




お〜きいエプロン (100枚入)

日本製

高品質 高質感 ビッグサイズ 厚ラミネート 抗菌パッケージ

小型タイプながら高機能のデンタルエプロン

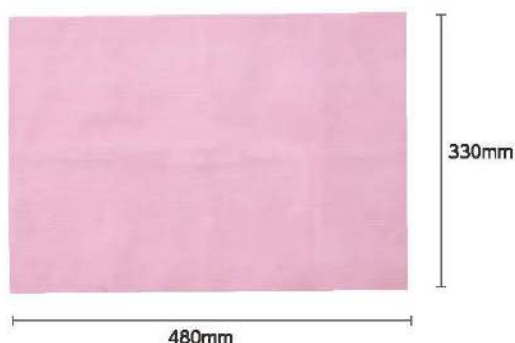

表面給水加工・
裏面防水加工



■ カラー ブルー イエロー ラベンダー ピンク



クリンエプロン プチ (Petit) (500枚入)

エンボス加工 高吸収 高防水 補強加工

清潔感ある紙コップで患者さんもニコリ

オードソックスな白に

診療室の雰囲気と和ませるカラーアソート。

容量はどちらも 5 オンス (約150ml) です。



クリンデント
ニュークリンカップ (600 個入)
(3,000 個入)



クリンデント
ニュークリンカップ カラーアソート (600 個入)
(3,000 個入)

コップを汚物入れに活用



直径 69mm



クリンデント
クリンキャップ (300 枚入)

※紙コップの開口部の直径は、各社で異なります。初めてご採用の際にはサンプルのご請求をおすすめします。

ソフトな感触でしっかりとした吸水性



化粧箱はカルテ保存BOXとして使用できます。(B5サイズ)

クリンデント ロールメン

●サイズ/入数

S: $\phi 8.5 \times 25\text{mm}$ / 2,750本入
M: $\phi 10 \times 30\text{mm}$ / 2,000本入

EOG
滅菌済

高吸水性

毛羽立ち
にくい

【日本製】

毎日の使用にうれしい良質カクメン



クリンデント カクメン

●サイズ/入数

(届出番号 13B3X00207000002) 【日本製】

#3: $30 \times 30\text{mm}$ / 約 4,600枚入 (500g)

#4: $40 \times 40\text{mm}$ / 約 2,600枚入 (500g)

#5: $50 \times 50\text{mm}$ / 約 1,700枚入 (500g)

EOG
滅菌済

高吸水性

毛羽立ち
にくい

経済的な DISPOSABLE タイプの紙製ヘッドレストカバー



スモールサイズ
直径約 190mm



ラージサイズ
直径約 250mm

クリンデント ヘッドレストカバー

スモールサイズ (50 枚入)
ラージサイズ (50 枚入)

低コスト

サイズ展開
2種類

DISPO

※ヘッドレストカバーの直径の大きさに種類があります。初めてご採用の際にはサンプルのご請求をおすすめします。