

診療用器材

- ・優れた耐錆性と弾性・無影灯の光に反射しないサテン加工・ステンレススチール1.4024使用



K.O.治療ピンセットSB

〈届出番号 13B1X10089000911〉

Made in
Poland

- ・真鍮製・国産ミラー規格に対応(一部商品を除く)



【規格: No.4-48UNF 0.5292mm】

ミラーホルダーライト

(5本入)

〈届出番号 13B1X10089000913〉 日本製

- ・二重映りのないクリアな反射
- ・ロジウムコーティングにより曇りにくく、優れた耐久性

反射率が高くクリアな視界



クリンデント フロントサーフェスミラー No.4 (12本入)

〈届出番号 13B1X10089000525〉

※オートクレープでの乾燥行程はお避けください。

134℃ 低コスト ロジウムコーティング 表面反付



クリンデント ミラートッププレーンNo.4 (20個入)

〈届出番号 13B1X10089000912〉

※オートクレープでの乾燥行程はお避けください。

134℃ 低コスト

やわらかい感触のシリコンチップ

自在に曲げられるディスプレイザブル排唾管



クリンデント シリコンバキュームチップ (10個入)

〈届出番号 18B3X10004000004〉 日本製

※オートクレープでの乾燥行程はお避けください。

200℃ 耐薬品性 やさしい感触



クリンエジェクター

(100本入)

〈届出番号 27B2X00268000007〉

従来品のワイヤーは1mm弱でしたが、クリンエジェクターは1.4mmにしたことにより曲げた角度をしっかりと維持できます。

手間を省いたプリカットタイプもある咬合紙


クリンデント アーティキュレーティングペーパー

- ①シート 120×22mm、厚さ35μm (120枚入)
- ②1/2カット 60×22mm、厚さ35μm (240枚入)
- ③1/3カット 40×22mm、厚さ35μm (360枚入)
- ④1/4カット 30×22mm、厚さ35μm (480枚入)

低コスト サイズ 4種類 ■ カラー 赤 青



セメント等を練りやすく工夫した合成紙ユボを採用

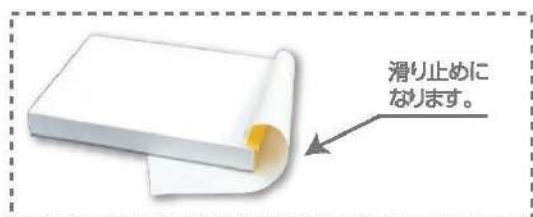

合成紙ユボとは？

ポリプロピレンを主原料として作られた合成紙です。均一のなめらかさをもつ表面性状で、耐水性に優れ破れにくいという特長があります。
また、紙粉がほとんど発生しないため、セメントに余分な成分が混ざりません。燃やしても有毒な塩素ガスなどは発生せず、資源として再利用もできるエコ素材です。

スタンダードサイズ



クリンデント
ユボマット (100枚×3入)

日本製


エコノミーサイズ



クリンデント
ユボマットミニ (100枚×3入)

日本製

使いやすい菱形のミキシングペーパー

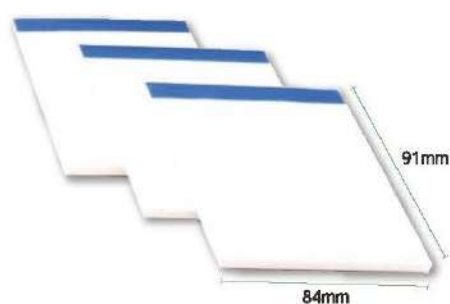

クリンデント
ミキシングペーパー (100枚×3入)

日本製

鮮やかなパステルカラーで幅広いラインアップ！
ボンディングやエッチングの塗布に便利なマイクロブラシです



クリンアプリケーター (100本入)

(届出番号 27B2X00268000013)

ディスボ 液ダレ 防止 ■ カラー レギュラー ファイン ウルトラ ファイン


手になじみやすい形状の 寒天シリンジ



スーパーカートリッジ・シリンジ (1本入)

170℃ 軽量

〈医療機器届出番号 11B2X00019KO1003〉 日本製

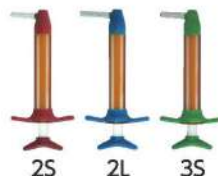

クリンアートシリンジ



(1本入)

140℃

〈医療機器届出番号 11B2X00019KO1005〉 日本製

スーパーカートリッジ シリンジ シリンジ針 (20G/18G 2入)	スーパーカートリッジ シリンジ シリンジ清掃針 (2入)	クリンアートシリンジ フック (1個入)	クリンアートシリンジ リングセット (1個入)	クリンアートシリンジ ヘッド (1個入)	クリンアートシリンジ ボディ (1個入)	クリンアートシリンジ ピストン (1個入)	クリンアートシリンジ ヘッドキャップ (1個入)
		●サイズ/2S, 2L, 3S		●サイズ/2S, 2L, 3S		●サイズ/2S, 2L, 3S	

遠赤外線寒天コンディショナー 2ステージフルオートタイプ



遠赤ウォーマー KODEC-5



〈一般医療機器届出番号 11B2X00019KOD001〉

質の高い天然の天草を主原料とした寒天印象材



衛生的な
1本包装

キャニオンコロイド シリンジタイプ (5/16) (60本入)

日本製



キャニオンコロイド カートリッジタイプ (48本入)

日本製



〈医療機器届出番号 219ADBZX00022000号〉

寒天とよく馴染み、ポスト印象採得時の補強や 石膏注入時のポスト変形を防ぐ



コロイドピン

(20本入)

〈届出番号 11B2X00019KO1004〉 日本製

全長150mmの
お徳用サイズ



■ カラー	赤	緑	黒
■ ワイヤ太さ	0.2mm	0.25mm	0.3mm
■ 外径	1.3φ	1.4φ	1.5φ

ケアストリーム社製の高画質なパノラマフィルム、オルソシステムにも対応

レギュラーシステム
対応

クリンデント
レギュラーパノラマフィルムCD-RPF(15×30cm 50枚入)

〈届出番号 13B2X10060060000〉

高画質 シャープな
画像オルソシステム
(希土類) 対応

クリンデント
オルソパノラマフィルムCD-OPF(15×30cm 50枚入)

〈届出番号 13B2X10060060000〉

高感度 高鮮鋭度

そのまま使う使用液タイプの自動現像機用現像・定着液

使いやすい
入れるだけの
使用液タイプ


クリンデント
自動現像機用現像液CD-D(1リットル×6入)

日本製


希釈
不要 品質を保つ
パウチ袋各社の
自動現像機に
そのまま使用
できます

クリンデント
自動現像機用定着液CD-F(1リットル×6入)

日本製

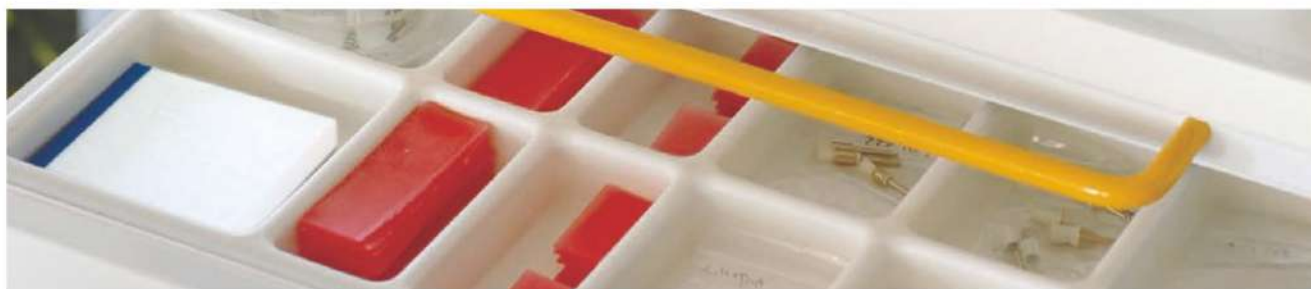希釈
不要 品質を保つ
パウチ袋


スムーズな軟化と適度な粘り・伸びがあるパラフィンワックス シンプルで使いやすいカルテ用ファイル

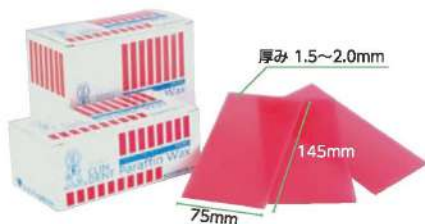

蜜蝋の量を多めに配合し、適度な粘りと気温の低い季節でも
割れにくい製品に仕上げている高品質パラフィンワックスです。

クリンデント パラフィンワックス (500g入)
(1000g入)

〈届出番号 13B2X00065000088〉

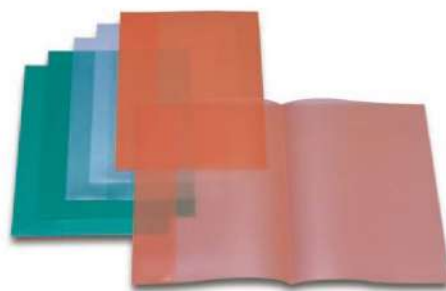


デンタルファイル

日本製

KDF-2 (B5変形) カラー：グリーン/レッド/クリア (50枚入)
KDF-A4 (A4) カラー：クリア (50枚入)
KDF-3/A4 (A4・ポケット付) カラー：クリア (50枚入)

世界が認めた品質「アンテオス」

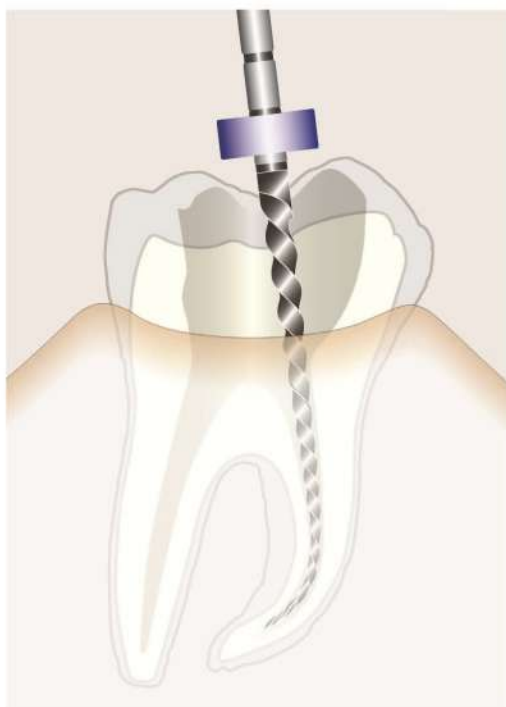

1969年創業のドイツ ミュンヘンに本社を置くVDW社は、世界で最も歴史のある歯科用根管治療具の専門メーカーです。「アンテオス」は、質の高いステンレススチール製の根管治療用手用ファイルです。

134°C 耐久性 適度なしなり ストッパー付き

Size List (リーマ/Hファイル/Kファイル)

色	21mm	25mm	28mm	31mm
■	08	08	08	08
■	10	10	10	10
□	15	15	15	15
■	20	20	20	20
■	25	25	25	25
■	30	30	30	30
■	35	35	35	35
■	40	40	40	40
□	45	45	45	45
■	50	50	50	50
■	55	55	55	55
■	60	60	60	60
■	70	70	70	70
■	80	80	80	80
□	90	—	—	—
■	100	—	—	—
■	110	—	—	—
■	—	120	—	120
■	—	130	—	130
■	—	140	—	140

ASSORT

15-40

45-80

90-110 (21mm以外は在庫限りの販売となります)

*90番以上のものにはストッパーがついておりません。

▲ リーマ

08,10 (6本入)
15~40 (6本入)
45~80 (6本入)
90~140 (6本入)

(届出番号 13BZX00065000025)

先端部



● Hファイル

08,10 (6本入)
15~40 (6本入)
45~80 (6本入)
90~140 (6本入)

(届出番号 13BZX00065000024)



■ Kファイル

08,10 (6本入)
15~40 (6本入)
45~80 (6本入)
90~140 (6本入)

(届出番号 13BZX00065000023)



ピーソリーマ

No.1~No.6 CA用(19mm) (6本入)

(承認番号 22000BZX00490000)



ゲーツドリル

No.1~No.6 CA用(19mm) (6本入)

(承認番号 22000BZX00497000)



エンジンリーマ 21mm/25mm/28mm

15~40 (6本入)

45~80 (6本入)


(承認番号 22000BZX00487000)

信頼の品質「ダイアデント」

ガッタパーチャ本体にミリマークのラインが施され根管長の計測がしやすく充填に便利です。

Size List

色	28mm	入り数(ガッタパーチャポイント)	入り数(ペーパーポイント)
□ 15		60本	
■ 20			
■ 25			
■ 30			
■ 35			
■ 40			
□ 45		120本	300本
■ 50			
■ 55			
■ 60			
■ 70			
■ 80			
□ 90			
■ 100			
■ 110		60本	120本
■ 120			
■ 130			
■ 140			
ASSORT			
25-40		120本	300本
45-80			
90-140		60本	-

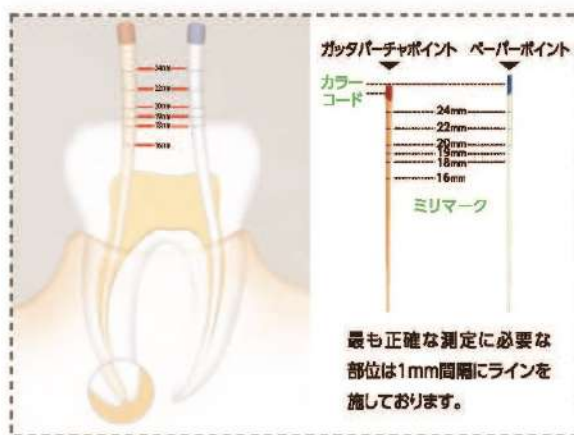

ダイアデント ガッタパーチャポイント (カラーコード・ミリマーク付)
25~100 (120本入)
15,20,110~140 (60本入)

〈部価番号 224AKBZX00095000〉



ダイアデント ペーパーポイント (カラーコード・ミリマーク付)
15~80 (300本入)
90~140 (120本入)



ダイアデント アクセサリーポイント
細・細小・細中・細大・小・中・太・太小・太中・太大・特・混合 (小・中・大)
(各150本入)

〈部価番号 224AKBZX00095000〉



アンテオス カラーコード シリコン・ストッパー
(200個入)



1個ずつ取り出せるスライド式ケース入りのシリコンエンドストッパーで、カラーコード対応です。



アンテオス インテリム・スタンド

250℃

薬液はもちろん、250℃の高温にも耐えられます。ジスクも一度だけはオートクレーブ滅菌でき、薬液を入れておくことも可能です。

補充用ジスク インテリム・スタンド用 フォームジスク
(55枚入)



高品質の天然ダイヤモンドを高密度に電着



P27
形態表を
ご参照ください

K.O.ダイヤモンド (5本入)

(医療機器届出番号 09B1X00006002010) 日本製

126°

切削能力に優れた満足できるこの一本



カーバイドバー

A形態 (10本入)

B形態 (10本入)

C形態 (10本入)



P28
形態表を
ご参照ください

[A形態]

1/4・1/2・1・2・3・4・5・6・7・8・331/2・34・35・36・37・57・58・169L・170・171・172・245・330・331・332・557・558・559・560・699・700・701・701L・702・703・1157・1158・1159・1557・1558・1559

[B形態]

M16DB・M14CF・701X・M21DC・M23DC・M15EZ・M15ZB

[C形態]

7408・7901・7902・7903・KGW1(1931)・1957・KGW2(1958)・1970

126°

(医療機器届出番号 09B1X00006003010) 日本製

豊富なバリエーションがそろったポイント類

126℃

P29・30
形態表を
ご参照ください

切削阻害の原因となる表層を1層削り出しているため、
開封後から直ちに高い切削効率が得られます。

カーボランダムポイント

(12本入)

(72本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006004010〉 日本製

シリコンポイントM2 (細粒)

シリコンポイントM3 (微粒)

(12本入)

(72本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006005010〉 日本製

ホワイトアラウンドポイント

(12本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006004010〉 日本製

シリコンカップM2 (細粒)

シリコンカップM3 (微粒)

シリコンカップCタイプ

(12本入)



原寸大

〈医療機器届出番号 09B1X00006005010〉 日本製

切削能力が高く優れた操作性

- ・切削効率の高いシャープな刃先を採用。
- ・チャック部分へのエアダストの侵入を防ぐユニディスク付き。

カーバイドカッターHP

● ● ● ● ● ●

〈届出番号 13B1X10089000551〉

Made in Germany 134℃ エニディスク付き 低コスト



ユニディスク付き (全ての商品に付いております)
ユニディスクはオートクレーブ不可 ※滅菌時はバーから外してください

P31・32
形態表を
ご参照ください

ジルコニアカッターHP

〈届出番号:13B1X10089001017〉



チタンコーティングカッターHP

〈届出番号:13B1X10089001018〉

マルチレイヤー
ダイヤモンドバーHP

〈届出番号:13B1X10089001019〉

リムダイヤ
ホイールHP

〈届出番号:13B1X10089001020〉

● ● ● ● ● ●
Made in Germany 134℃ エニディスク付き 低コスト